



サロンやクリニックでしか受けられなかったLED美容が気軽にご自宅で実現!

# STS Dr. Kanon of BEAUTY SCIENCE

希望小売価格 176,400円(税込)

## — STS Dr.Kanonは“LED(発光ダイオード)”を使用した光線照射型美容機器です —

皮膚に有効な光を肌の奥まで届けることで、美肌づくりをお手伝いします。LEDの光には肌を内側から活性化して健やかな状態へと導く働きがあり、最近の技術によりこれを日々のスキンケアに取り入れることが可能となりました。

美肌づくりは決して特別な事ではありません。自分の肌と向き合いながら日々適切なスキンケアを続ける事が最も重要です。毎日のお肌のお手入れに、STS Dr.Kanon が加わることは大変有効なスキンケアの手段につながる事でしょう。


「いつまでも若々しく美しい素肌」—— この願いをSTS Dr.Kanon に込め、STS より皆様へ、美肌づくりのパートナーをお届けいたします。

## — STS Dr.Kanonの特長とLED(発光ダイオード Light Emitting Diode)について —




- \* 美容皮膚科医が開発した、日本製本格LED光線照射美容機器  
※医療機器ではありません
- \* 超高輝度LED(5mm×54個)を採用
- \* 大型平面照射部(60mm×40mm)とスポット照射部の2Way方式、4段階調節機能
- \* 小型軽量タイプ(サイズ:170×60×38(mm)・重量:128g)
- \* ノーマルスキン・ドライスキン用(近赤外線LED・赤色LED・黄色LED)
- \* PL保険加入済み
- \* RoHS指令対応品  
【人の健康や環境負荷を最小限に抑える事を目的とする、電気・電子機器に対する特定有害物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム等)の使用制限に関するEUの指令】

近赤外線+赤+黄

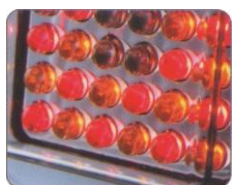


日常のスキンケア用

近赤外線+赤

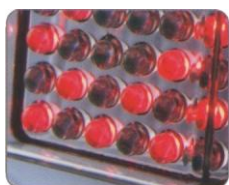

集中ケア用

近赤外線+黄

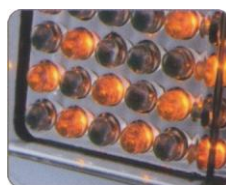

集中ケア用

赤



スポット集中ケア用

# STS Dr.Kanonの使い方

## <あて方の基本>

気になる箇所の肌に直接、本体発光部をつけて、**2分間(タイマー終了まで)**動かさずに照射します。



## 「豊麗線」に・・・

前面発光部を豊麗線<sup>ほうらいせん</sup>上に沿うように直接肌につけ、タイマー終了までの2分間は動かさずに照射します。

一度に照射できない範囲は前面発光部を移動させ、同様に2分間照射します。

## 「目尻」に・・・

最初に照射光を直接目に当てないように、付属の遮光プレートでカバーします。前面発光部で目尻を覆うように直接肌につけ、タイマー終了までの2分間は動かさずに照射します。



## 「眼瞼部」に・・・

最初に照射光を直接目に当てないように、付属の遮光プレートでカバーします。発光部で眼瞼部<sup>がんげんぶ</sup>を覆うように直接肌につけ、タイマー終了までの2分間は動かさずに照射します。顔の立体にに応じて、前面部と先端部を使い分けてください。

